




## Venus pensa anche al dopo

Più di una cavitazione: quella di Wavemed va oltre. Disponendo di due tipologie di erogazione dell'energia, sia continua che pulsata, Venus può affrontare in modo più completo il problema del grasso corporeo. A un trattamento in modalità continua, seguirà una fase in modalità pulsata, che predispose l'organismo al massaggio linfodrenante necessario alla fine di ogni seduta, favorendo e amplificando lo smaltimento dei liquidi in eccesso. Così i risultati saranno più immediati e duraturi.

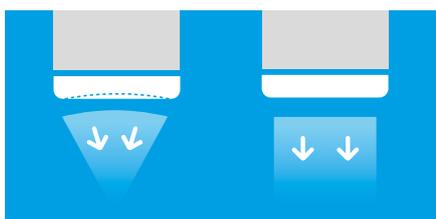

### Più manipoli per trattamenti più sicuri

Dotata di due manipoli, uno concavo e uno piatto, permette di concentrare gli effetti del trattamento a profondità diverse. Nelle zone più delicate del corpo e in prossimità degli organi vitali, basta sollevare la pliche di adipe e usare il manipolo concavo per convogliare l'energia a livello più superficiale, e sarai certo di lavorare in sicurezza.



### Efficacia garantita

Per uno snellimento sempre sicuro ed efficace, Wavemed ha predisposto l'SCC Save Calibration Control, il sistema di auto-calibrazione del manipolo. La macchina monitora costantemente le frequenze degli ultrasuoni erogati, assicurando i valori corretti per un effetto cavitazionale sicuro. Così hai la certezza che la macchina lavori sempre al servizio del cliente per ottenere il massimo dei benefici e risultati.



### Subito pronta all'utilizzo

Studiato per la comodità dell'operatore, il Dcs Detection Control System riconosce automaticamente il manipolo. In questo modo anche installare un sistema dotato di più accessori diventa semplice e rapido, perchè puoi inserire i diversi connettori in una qualsiasi delle uscite a disposizione. E Venus li riconosce per te.

### Tre programmi già pronti per te

Se non hai tempo o voglia di inserire i vari parametri di trattamento, è Venus a farlo per te. Con i tre programmi preimpostati per l'adiosità, la tonificazione e la cellulite, ti offre delle soluzioni universali e già pronte per iniziare subito a lavorare.

### L'unica sinergia su misura per il cliente

Con Venus modular system la sinergia è qualcosa di nuovo. Grazie alla comunicazione verticale tra i moduli, combinando l'azione della cavitazione a quella della radiofrequenza sullo stesso manipolo, per la prima volta potrai sommare i benefici delle due tecnologie, senza rinunciare a gestirne i singoli parametri. Anche lavorando in sinergia, infatti, potrai dosare la quantità di energia da impiegare nella Rf e scegliere la profondità dell'effetto cavitazionale. Miscelando una specifica azione lifting con una tonificazione più o meno intensa, otterrai di volta in volta il trattamento più efficace per il cliente.

# Venus

## CAVITAZIONE

Generale

DCS - Detection Control System  
SCC - Save Calibration Control  
Display Touch Screen 10,4"

Alimentazione	110 - 240VAC 50-60Hz
Assorbimento	150 VA
Apparecchio tipo	BF
Dispositivo medico	Classe IIb
Classe di isolamento	I
Fusibili	2 x T4A 250V
Involucro	ABS ignifugo
Potenza d'uscita ultrasuoni	40W
Frequenza d'uscita ultrasuoni	37-42 KHz
Funzionamento	Continuo o pulsato
Durata impulsi	500msec
Manipolo	Piatto (diametro 60mm) Concavo (diametro 60mm)
Area radiazione manipolo	30cm <sup>2</sup>
Connettività	Wifi , LAN, USB
Sinergia	Cavitazione + Radiofrequenza
Dimensione l x a x p	400 x 310 x 230 mm
Accessori	Carrello, trolley
Peso	10 kg
Precisione dei valori indicati	± 20%